

HEMOSTATICO NATURAL A BASE DE SABILA



HaemoCerTM PLUS

Polvo Hemostático

Contenido:

Origen

Uso

Aplicaciones diversas

Características

Virtudes del producto

Técnica de Aplicación

Objetivos Específicos

HaemoCer es un sellador hemostático polisacárido hidrofílico de rápida acción a base de sábila, que al entrar en contacto con la sangre la deshidrata creando una alta concentración de plaquetas, glóbulos rojos y proteínas de coagulación en el lugar del sangrado, lo cual acelera la cascada de coagulación fisiológica. Al interactuar con la sangre se produce rápidamente un gel transparente que se adhiere y forma una barrera mecánica sobre el sangrado. HaemoCer se reabsorbe luego de 24 hrs de ser aplicado. HaemoCerTM no contiene ningún componente animal o humanos y se reabsorbe y es degradado por histaminasas, incluyendo amilasa y glucoamilasa rápidamente. HaemoCerTM está indicado para su uso en procedimientos quirúrgicos o lesiones como un hemostático complemento cuando el control de la hemorragia de capilar, venosa o vasos arteriolares por la presión, ligadura, y otros medios convencionales es ineficaz o poco práctico.



Características:

- 100% natural a base de sábila, sintético y absorbible.
- Tiempo de hemostasia máximo 15 segundos.
- Minimiza el riesgo de infecciones y granulomas.
- No requiere preparación previa.
- Rápida acción.

Uso:

Tratamiento de sangrados locales y difusos.

Para sangrados en líneas de sutura.

Permite sustituir a las colas de fibrina en cirugía vascular.

Permite sustituir a la cera para hueso y a los electrocauterizadores para controlar el Sangrado óseo.

Aplicaciones diversas:

Abdominal: resección de colon

Cardiaca: esternón, reemplazo valvular aórtico,

bypass, aneurisma de aorta.

Cirugía Hepática: resección de hígado, extirpación de tiroides.

Cirugía Torácica: fistulas de pulmón.

Cirugía Vascular: aneurisma abdominal aórtico, endarterectomía de carótida.

Columna: fusiones y

tumores

Ginecología: tumor de

útero (abierto y laparoscópico)

Neurocirugía: tumores, aneurismas, mav, etc

ORL: parotidectomía, epistaxis

Trasplantes: riñón

Urología: prostatectomía

“Elimina los riesgos Post-quirúrgico de los pacientes”

Virtudes del producto:

Seguridad

No contiene componentes animales ni humanos. Utilizando Haemocer PURE, un material derivado natural, se minimizan los riesgos de infecciones y complicaciones de sangrado durante la cirugía. Se reabsorbe rápidamente (24-48hs) y fácilmente se irriga con solución salina.

Eficacia


Mecanismo Dual. Su naturaleza ultra-hidrofílica logra acelerar la cascada de coagulación, con la formación de una matriz gelatinosa, que forma una barrera mecánica al sangrado.

Fácil de Usar

No requiere preparación previa ni tiene requerimientos especiales de almacenamiento.

Diversos rangos de aplicación:

Puede ser utilizado en un gran rango de procedimientos quirúrgicos.

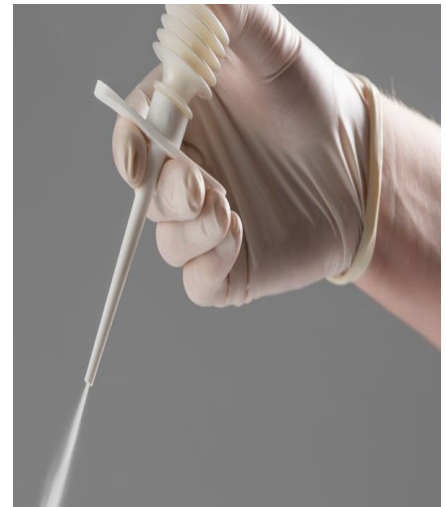

Técnica de aplicación

- Rápido siempre es mejor: aplicar y colocar una gasa secar rápido
- Evitar el contacto del aplicador con la sangre
- En caso que se tape, cortar la parte tapada del aplicador
- Cubrir todo el perímetro del sangrado
- Vaciar el aplicador (no hace falta ahorrar!!!)
- Identificar la verdadera fuente de sangrado
- Re-aplicar en caso de ser necesario
- Aplicar presión estable si es necesario
- Sangrado vs. intensidad de presión
- No retorcer ni girar la gasa en la compresión
- Siempre se aconseja irrigar luego de hacer hemostasia
- Obligatorio en neurocirugías

Objetivos específicos:

Disminuir la mortalidad y morbilidad de los pacientes por sangrado quirúrgico.

-Disminuir el tiempo de absorción a un máximo de 48 horas del producto

-Reducir a 0 los efectos colaterales (alergias y reacciones adversas)

-Disminución de transfusiones sanguíneas

-Que sus componentes químicos sean naturales.

Presentación del producto

HaemoCer™ PLUS (incl. Aplicador) 1g

HaemoCer™ PLUS (incl. Aplicador) 2g

HaemoCer™ PLUS (incl. Aplicador) 3g

HaemoCer™ PLUS (incl. Aplicador) 5g

(Nuevo) Aplicador universal de 440 mm para cirugía laparoscópica.

